


弊社のオリジナル製品

用途別の秤量装置 幅広い秤量に対応しています

- AdjustMate100SRに対応して、ロータリーポンプで秤量した液を高精度で希釈できます。(SR0500)
- ノズルユニットの採用で、秤量後の液の漏れをなくします。
- 自動化など各種カスタマイズに対応します。
- ラベルプリンターに接続可能です。
- データも20個まで自動保存。

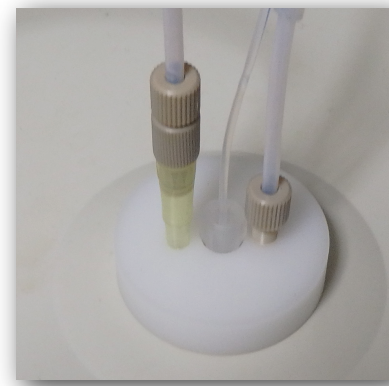

ロータリー秤量
自動希釈ユニット

品番	品名	仕様	価格
SR0010	制御ユニット	制御ボックス、20文字4行LCD、ポンプ	¥450,000
SR0100	プリンター込み制御ユニット	プリンター対応制御ユニット+ラベルプリンタ	¥550,000
SR0500	自動希釈制御ユニット	制御ボックス、20文字4行LCD、ポンプ	¥650,000
SR0600	プリンター込み自動希釈制御ユニット	プリンター対応制御ユニット+ラベルプリンタ	¥750,000
WD0100	バルブボトルキャップ	電磁弁付きボトルキャップ	¥39,000
WD0200	バルブボトルキャップ	電動ピンチバルブ付きボトルキャップ	¥39,000
WD0250	Wバルブユニット	2個の電磁弁付きボトルキャップ	¥76,000
WW0100	Wノズルユニット	PEEK(φ3mm・サファイヤ 0.25mm)	¥40,000

プリンタ接続モデルはラベルプリンタ（ブラザー社製QL650TD）が付属します。

仕様、価格は予告なく変更することがございますのでご容赦ください。

価格には消費税は含まれていません。 本カタログは2016年10月現在のものです。


株式会社システムバイオティックス
 〒252-0203
 神奈川県相模原市中央区東淵野辺 1-13-1-504
 TEL 042-786-0340 FAX 042-786-0341
 E-mail: info@systembiotics.com

<http://www.systembiotics.com>

自動希釈・秤量装置

Adjust Mate100R

ロータリーポンプを使った

自動秤量装置



難しかった秤量・希釈を簡単に！




（株）システムバイオティックス

ロータリーポンプを使った自動秤量装置


特 徴

- 粘度な液体の秤量に最適です。
- バルブを使用しないのでメンテも楽々。
- 目標秤量が近づくとき低速に自動切り替え。
- 吐出速度は最大 4 ml/min 。
- 吐出速度を自由に設定できます。
- 目的の重量に達すると逆回転でノズル先の液滴を吸引。
- ディスポチップが装置できるノズルを用意。

画面は見やすい4行20文字のLCD

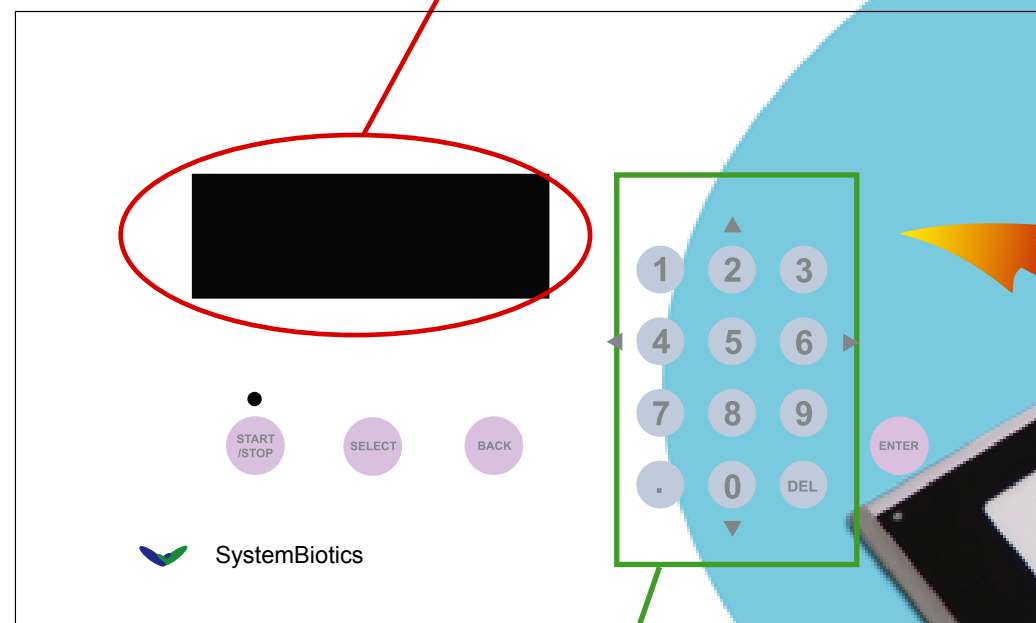

希釈倍率もテンキーでワンタッチ入力

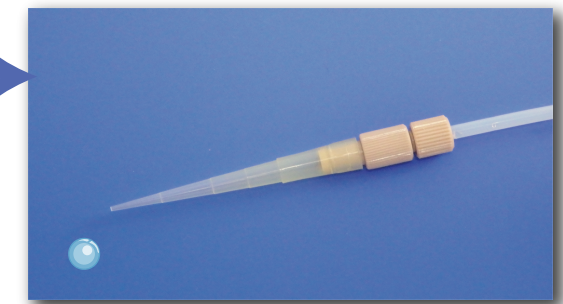

● 小さい液滴での分注が可能に

0.001g 秤量の天秤で測定